



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ирригатор для полости рта Nicefeel 300мл FC1591



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	3
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ	4
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА	5
ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ	9
РАБОТА С АККУМУЛЯТОРОМ	9

При использовании электротехнической продукции, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Осторожно

- Для снижения риска поражения электрическим током:

· Всегда отключайте этот продукт сразу после использования.

· Не используйте во время купания.

· Не кладите и не храните изделие там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину.

· Не кладите и не бросайте устройство в воду или другую жидкость.

· Если продукт попал в воду, немедленно отключите его от питания.

· Проверьте шнур зарядного устройства на наличие повреждений перед первым использованием и в течение срока службы изделия.

Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, пожара, серьезных травм или повреждений:

· Не подключайте это устройство к системе напряжения, отличной от системы напряжения, указанной на устройстве или зарядном устройстве.

· Не используйте этот продукт, если у него сломан шнур или вилка.

· В случае неправильной работы или попадания в какую-либо жидкость обратитесь к местному дистрибьютору.

· Не направляйте поток воды под язык, в ухо, нос или другие нежные органы. Этот продукт оказывает давление, которое может привести к серьезному повреждению этих органов. Обратитесь к инструкции по эксплуатации для правильного использования.

· Используйте этот продукт только так, как указано в этих инструкциях. Это нормальное явление, если при первом использовании в первый раз у вас будет небольшое кровотечение. При сильном кровотечении, пожалуйста, прекратите использование и обратитесь к стоматологу.

· Заполните резервуар водой или другими растворами, рекомендованными стоматологом.


· Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в изделие.


· Держите зарядное устройство и шнур вдали от нагретых поверхностей.

· Не работайте там, где используются кислородные или аэрозольные баллончики.

- Не используйте ополаскиватели, содержащие йод или чайное дерево.
- Не используйте при ношении каких-либо устных украшений. Пожалуйста, снимайте их перед использованием.
- Не используйте, если у вас есть открытая рана на вашем языке или во рту.
- Только для домашнего использования. Не используйте на открытом воздухе.
- Внимательно проинструктируйте и присматривайте за детьми и лицами с особыми потребностями в правильном использовании этого продукта.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

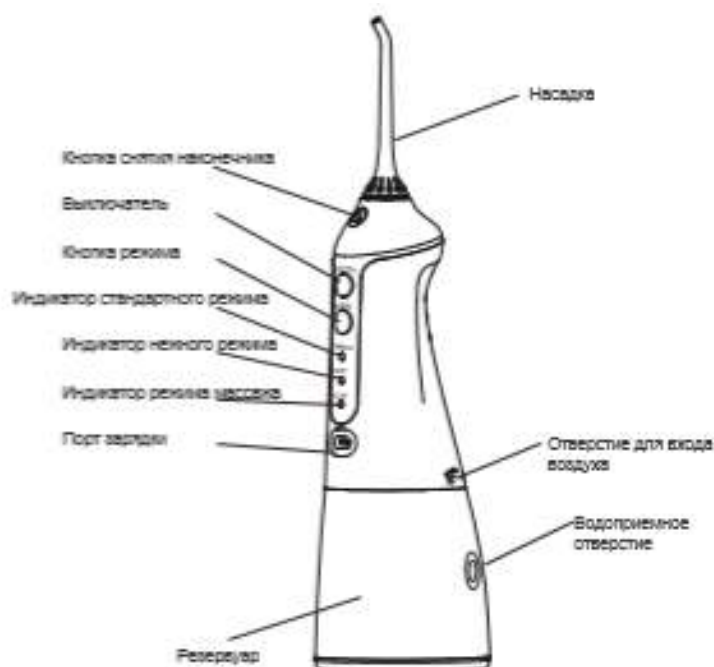

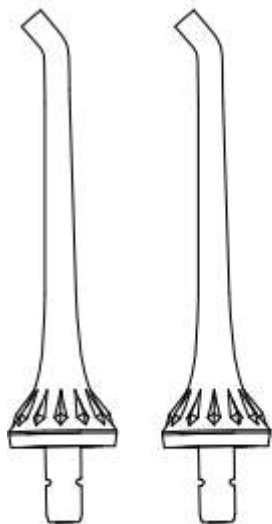


Стандартные насадки x 2




Зарядное устройство

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Крайне важно! Перед первым использованием полностью зарядите устройство, вставьте штекер USB в разъем питания и подключите его к источнику питания. Во время зарядки устройства продукт не может быть использован.

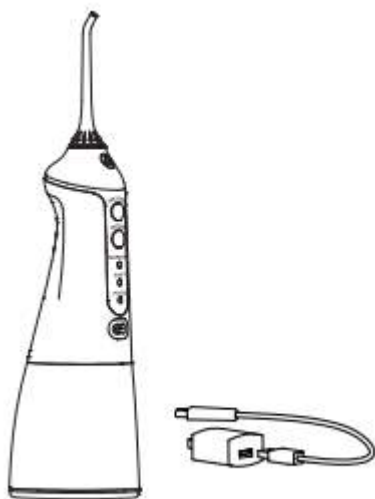

Как показано на схеме 4, откройте крышку резервуара для воды и налейте воду в резервуар для воды; Примечание: пожалуйста, убедитесь, что при заливке воды в бак для воды устройство выключено.

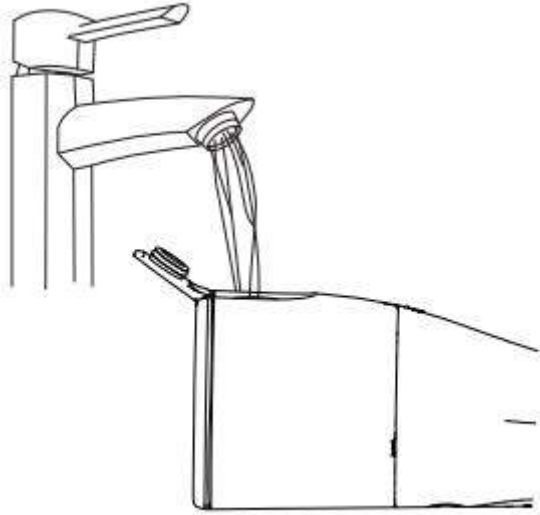

Установка и снятие наконечника Вставьте наконечник в отверстие ручки, прикручивая, пока не услышите щелчок.




При замене или удалении наконечника, пожалуйста, нажмите кнопку разборки на ручке ирригатора, прежде чем снимать струйный наконечник.




- Этот продукт имеет функцию запоминания, и после его повторного включения режим давления воды будет таким же, как при выключении устройства.
- Стандартный, мягкий и массажный режимы можно переключать независимо от того, включено устройство или нет.
- Режимы могут быть изменены, когда устройство выключено, вы можете выбрать режим, который вам нравится, прежде чем снова включить устройство.
- Независимо от режима, после 120 секунд работы продукт автоматически выключится.
- Если режим массажа используется более 3 секунд, отображается оставшийся заряд батареи.
- Во время зарядки три индикатора будут мигать. Когда все три индикатора постоянно горят, это указывает на то, что устройство заряжено.
- Если во время использования, все три индикатора мигают, это указывает на то, что питание устройства недостаточно, и требуется перезарядка.
- Не используйте устройство во время зарядки.
- Поворачивайте диск с наконечником, чтобы отрегулировать направление потока воды.



Удерживая устройство под нисходящим уклоном, поместите наконечник струи в рот и направьте наконечник струи на зубы перед включением устройства.

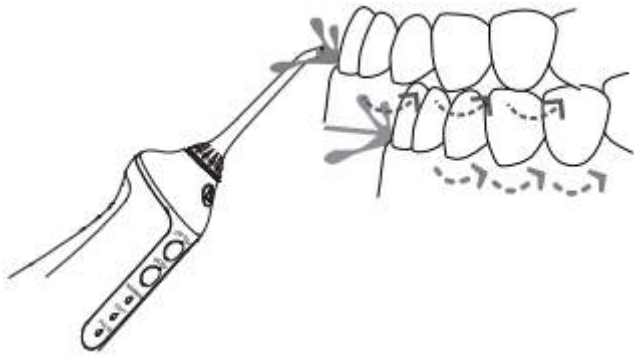



Поток воды должен быть направлен на зубы под углом 90 градусов, слегка закройте рот, чтобы избежать разбрызгивания воды и достичь лучшего результата. Пожалуйста, направляйте ирригатор от коренных зубов к резцам. Затем проведите вдоль десен, а также между зубов, пока область вокруг десен и промежутки между зубами не будут полностью очищены.

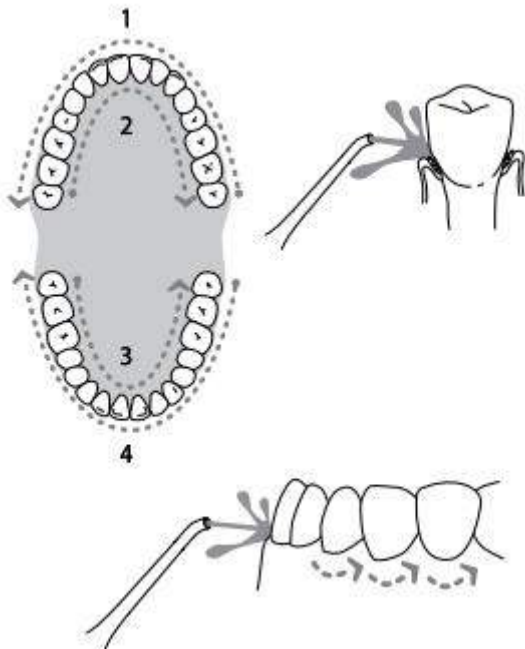

Следующее использование

Пожалуйста, отключите питание, а также опорожните резервуар для воды. Обеими руками, как показано на рисунке 2 - левой рукой держите корпус продукта, а правой рукой - бак для воды. В то же время поверните вниз против часовой стрелки, чтобы снять резервуар для воды.

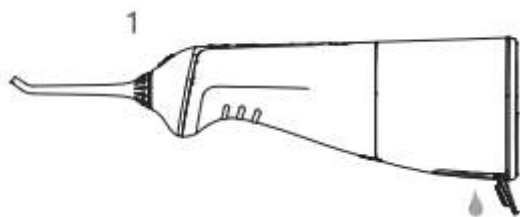

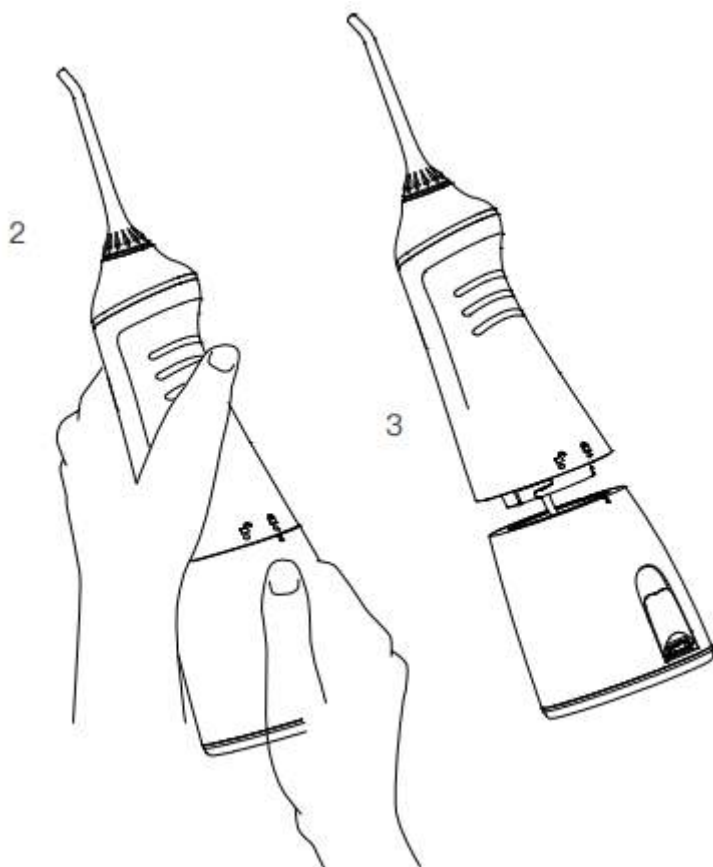

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

- Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряжено в течение примерно четырех часов;
- Если необходимо хранить устройство в течение длительного периода времени, пожалуйста, полностью зарядите устройство заранее.
- Чтобы продлить срок службы батареи, пожалуйста, своевременно заряжайте устройство при недостаточном питании.

РАБОТА С АККУМУЛЯТОРОМ

Внутри устройства находится литиевая батарея, которую нельзя заменить. По окончании срока службы батареи, пожалуйста, утилизируйте её в местном центре утилизации.

Проблемы	Причина	Решение
Утечка воды между наконечником струи и верхней крышкой	Уплотнительное кольцо на неподвижном гнезде для наконечника повреждено, и наконечник невозможно установить	Обратитесь к продавцу для ремонта и правильно установите форсунку.
Бак для воды подтекает	Уплотнительное кольцо ослаблено	Переустановите его правильно
Неадекватное давление	Низкое напряжение	Используйте после зарядки
Устройство не включается	Низкое напряжение	Используйте после зарядки
Продукт не сливает воду	Фильтрующая сетка засорена	Очистите фильтрационную сетку
Бак для воды подтекает	Отверстие входа воздуха производит воду	Стандартное явление - принцип высокого давления воздуха.

Напоминание:

1. Во время первоначального использования, пожалуйста, выберите «нежный режим», чтобы избежать кровоточивости десен из-за недостаточной адаптации к использованию. После последовательного использования в течение двух недель должны быть улучшения. Если кровотечение чрезмерное или кровотечение продолжается через две недели, рекомендуется обратиться за профессиональной стоматологической помощью.
2. Не рекомендуется использовать продукт детям или людям с зубными имплантатами, язвой в полости рта или открытыми язвами полости рта

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**